



مرکز مشاوره
ارائه مراقبت های
پرستاری در منزل
نفسی

۰۳۵ ۳۶۲۴ ۱۹۴۸ ☎ ۰۹۱۳ ۳۵۳ ۳۰۶۸

📍 یزد، بلوار بسیج، بن بست ۵، پلاک ۱۵

🌐 WWW.NAFASHOMECARE.IR



مرکز مشاوره و
ارائه مراقبت های
پرستاری در منزل
نفس



نام دستگاه: پالس اکسیمتری

مدل:

برای اجاره و هماهنگی با شماره های

۰۹۱۳-۳۵۳-۳۰۶۸ یا ۰۳۵-۳۶۲۴-۱۹۴۸

تماس حاصل فرمایید.



- ۱ کلید روشن و خاموش
- ۲ محل قرارگیری انگشت دست
- ۳ نمایشگر دستگاه
- ۴ درصد اکسیژن خون
- ۵ تعداد ضربان قلب
- ۶ محل فشار برای باز شدن دهانه دستگاه
- ۷ لولای دستگاه
- ۸ محل قرارگیری باطری در پشت دستگاه


- ۱ کلید روشن و خاموش
- ۲ محل قرارگیری انگشت دست
- ۳ نمایشگر دستگاه
- ۴ درصد اکسیژن خون
- ۵ تعداد ضربان قلب



*پالس اکسی متر Pulse Oximeter انگشتی دستگاه کوچکی است که برای اندازه گیری تعداد ضربان قلب PR و میزان اکسیژن اشباع خون SPO₂ از طریق انگشت بیمار عمل می کند.

شروع به کار دستگاه

این پالس اکسی متر انگشتی به شکل یک گیره است دهانه آن را باز نموده و انگشت خود را به صورتی که صفحه نمایش آن بالا باشد در داخل دستگاه قرار دهید.

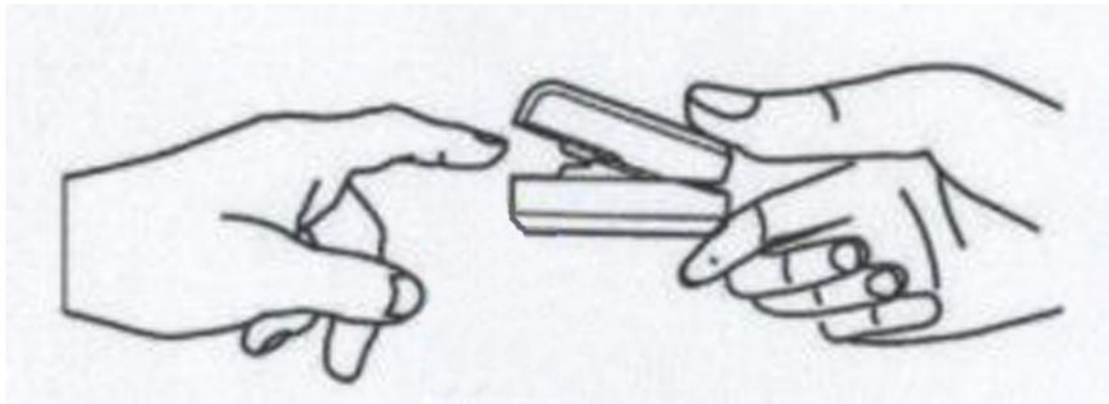

پس از قرار دادن انگشت خود در دستگاه دکمه روشن را بزنید و دو ثانیه صبر کنید تا دستگاه به صورت خودکار درصد اکسیژن اشباع خون و تعداد ضربان قلب را بر روی صفحه نمایش مشاهده نمایید.



نکات مهم برای کارکرد بهتر دستگاه

۱- هنگام اندازه گیری، انگشت باید کاملاً درون سنسور پالس اکسی متر قرار گیرد.

۲- در هنگام اندازه گیری از حرکت دادن دست خودداری نموده و آسوده باشید.

۳- به هیچ عنوان انگشت مرطوب خود را درون سنسور دستگاه قرار ندهید.

۴- اگر مانعی برای عبور نور دستگاه از انگشتان مثل لاک ناخن وجود دارد قبل از اندازه گیری آن را حذف نمایید.

۵- داشتن ناخن های خیلی بلند ممکن است دقت اندازه گیری دستگاه را کاهش دهد.

۶- انجام فعالیت های فیزیکی شدید و همین طور وجود دستگاه های الکترومغناطیسی در اطراف ممکن است بر دقت اندازه گیری دستگاه اثر معکوس بگذارد.

۷- سرد بودن انگشت و خونرسانی نامناسب آن باعث خطای اندازه گیری می شود.





مرکز مشاوره و
ارائه مراقبت های
پرستاری در منزل
نفس

اکسیژن ساز



ساکشن پرتابل



پالس اکسیمتر



@NAFASHOMECARE